

Compact Dry Incubator

よりコンパクトな
ドライインキュベーター
新登場!



幅410×奥行530×高さ177mm

NAKA ivf コンパクトドライ インキュベーターは
これまでにない省スペースを実現した無加湿型インキュベーターです。
コンパクトながらも6つのチャンバーを搭載。単一培養により胚の取り違えを防ぎ、
インキュベーターのドアの開閉による庫内の環境変化を軽減、安定した培養環境を維持します。

カタログ番号	品名	規格
NM-DI0602	コンパクトドライ インキュベーター ・ディッシュ静置用アルミプレート×6枚(NUNC、FALCON共通)	一式

Compact Dry Incubator

特長


- これまでにない省スペースを実現した無加湿型インキュベーターです。
- 無加湿型のためカビの発生がなく、チャンバー内の清掃が簡単です。
- フタを開閉するとセンサーが感知してCO₂ガスを自動的にフラッシング。急速にチャンバー内のCO₂濃度が復帰します。
- 内蔵HEPAフィルターによりクリーンなガスを各チャンバーへ送り込みます。
- 見やすい7インチのタッチパネルフロントディスプレイを採用。



- 付属のアルミプレートはファルコン35mmディッシュ(353001)、60mmディッシュ(353002)、ダブルディッシュ(353037)、ヌンク4ウェルディッシュ(176740)に対応しています。
- 外部アラームシステムに接続が可能です。

オプションの〈ダブルリッド〉

チャンバーのフタを開閉することなく中のディッシュの確認が可能です。

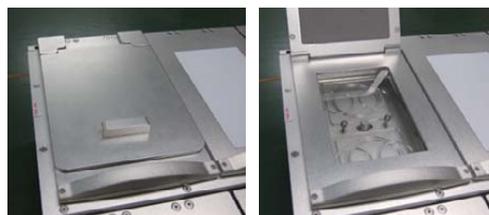

仕様	
品名	コンパクトドライインキュベーター
型番	NM-DI0602
外径寸法	W410×D530×H177mm
チャンバー内寸法	W86×D146×H26mm
重量	22kg
CO ₂ 設定範囲	0~20%
O ₂ 設定範囲	0~20%
温度設定範囲	室温+3℃~45℃
供給ガス	100%N ₂ 、100%CO ₂
チャンバー数	6室
ディッシュ収納枚数	最大24枚(プレート使用時)
電源	100V、50/60Hz、250W

専用ラック

W540×D750×H820mm



※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

製造販売元



株式会社ナカメディカル

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>